


migrated hernia rake®

(マイグレイテッドヘルニアレーキ)

【migrated hernia rake TF用】

従来の鉗子と異なり、顎が一片だけで、
 回転する方向が顎口面に対して垂直となっております。
 PELD transforaminal approachの際に、
 migrateした椎間板ヘルニアを
 この器具と椎体背面との間で挟んで引き出します。
 ヘルニアが係留されている場合でも
 ヘルニアを引き延ばして
 その末端を鉗子でつかめるようにします。
 顎長が長いものでは、
 より大きくmigrateしたヘルニアにも届きます。
 盲目的な操作であっても、つかんで引き出すのではなく、
 この器具でヘルニアの背側と硬膜の間を剥離し
 その腹側にあるものだけを引き出すため
 安全です。

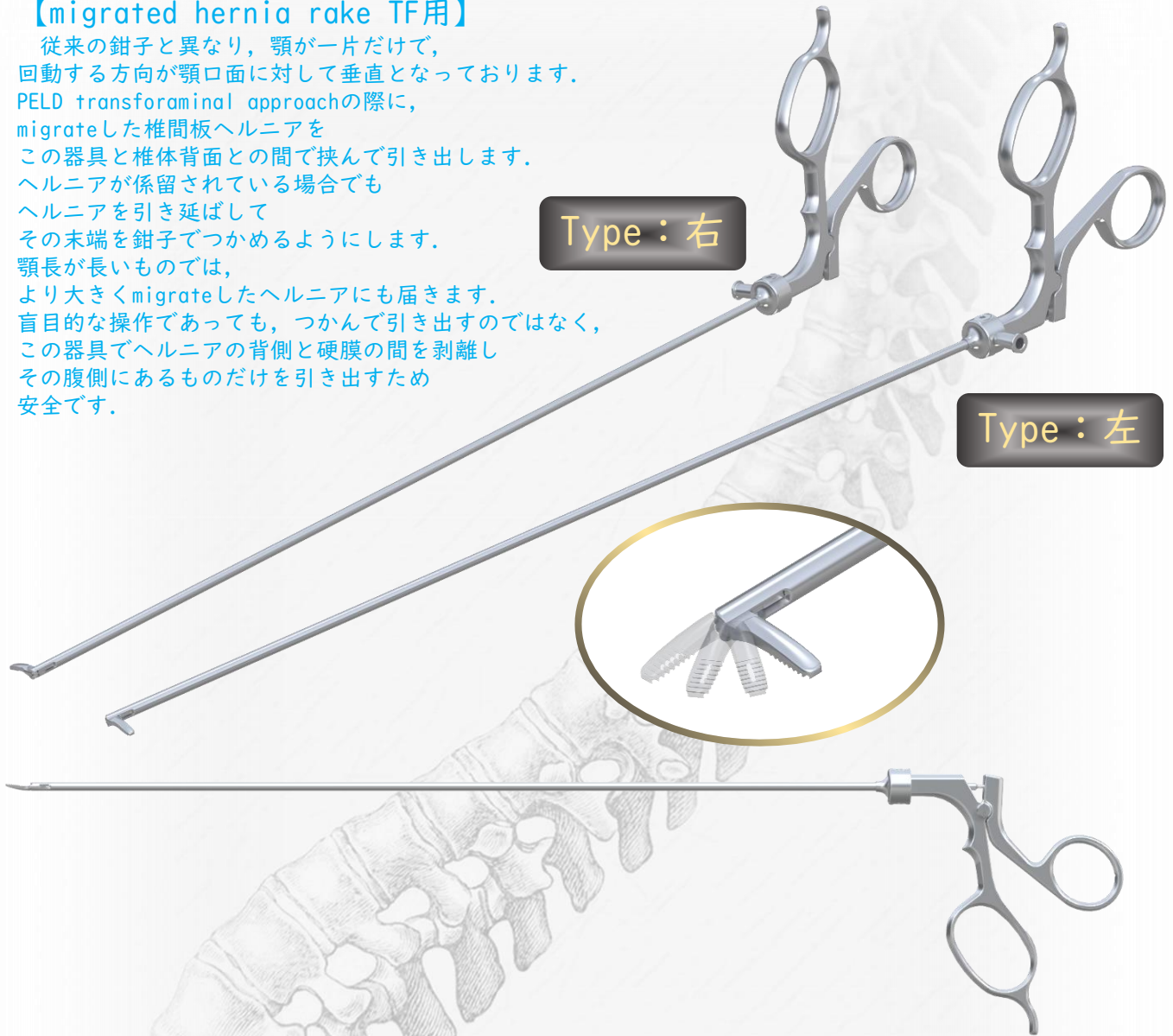

商品名 : migrated hernia rake® TF用	Type	Overhang Length	OD	Working Length
	右	9mm	3.5mm	360mm
	左			
	右	12mm		
	左			

※写真は実物大ではありません。予告無く変更する場合がございます。
 各種特注サイズ承ります。

販売名：フェジ鉗子
 一般的名称：再利用可能な内視鏡用非能動処置具
 製造販売届出番号：21B2X1001100001
 クラス分類：一般医療機器
 製造販売業者：足立工業株式会社
 TEL：0575-22-0052
 Vol.1-2022.10


migrated hernia rake®


(マイグレイテッドヘルニアレーキ)

【migrated hernia rake all-around用】

TF用とは異なり、回転する方向が顎口面方向となっております。
働きはTF用と同じです。

transforaminal approachの際にも使えますが、
posterolateral approachや
interlaminar approachのような
背側方向からアプローチする場合で有用です。

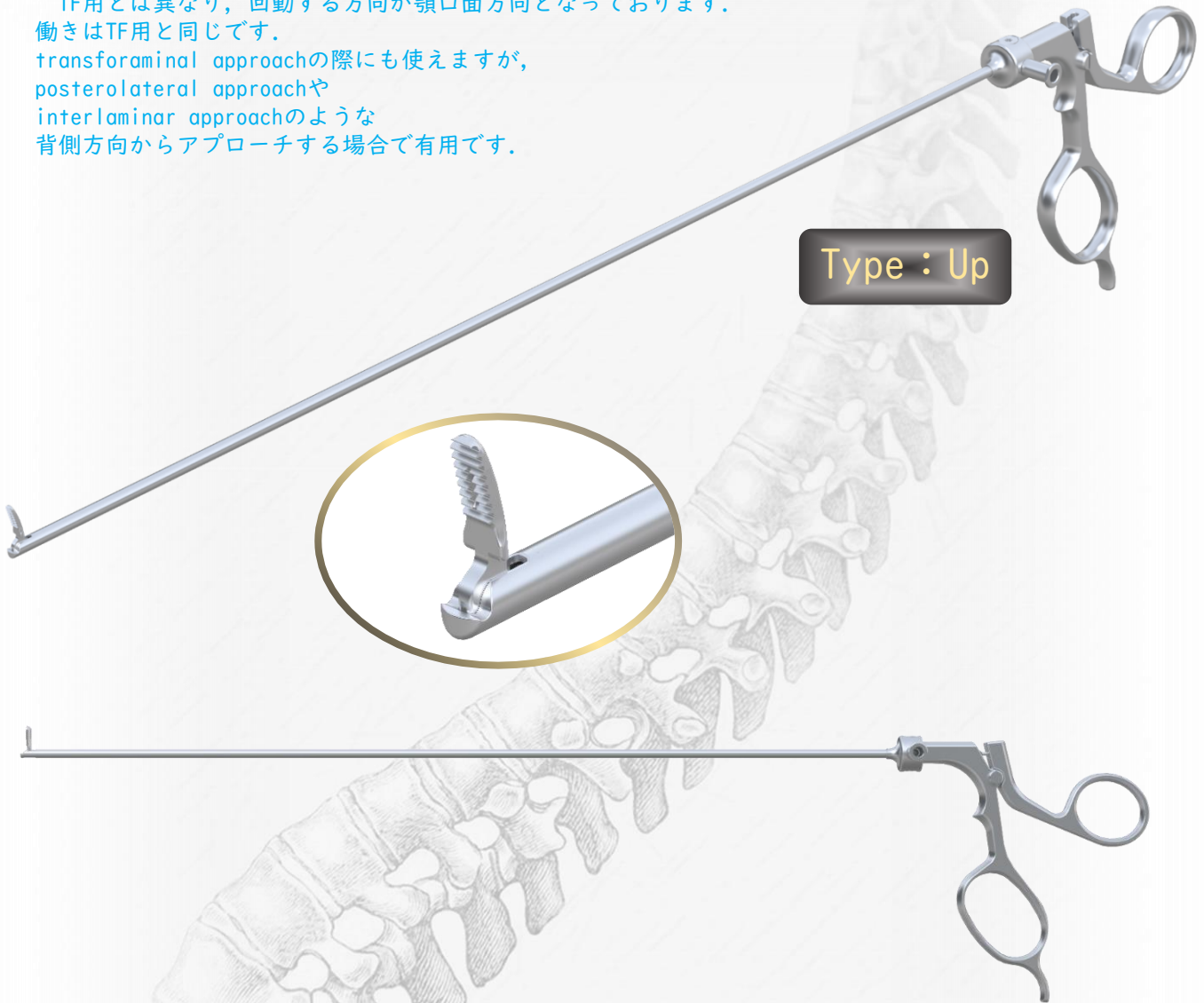

商品名 : migrated hernia rake® all-around	Type	Overhang Length	OD	Working Length
	Up	10mm	3.5mm	360mm
	Down			

※写真は実物大ではありません。予告無く変更する場合がございます。
各種特注サイズ承ります。

販売名：フェジ鉗子
 一般的名称：再利用可能な内視鏡用非能動処置具
 製造販売届出番号：21B2X10011000001
 クラス分類：一般医療機器
 製造販売業者：足立工業株式会社
 TEL：0575-22-0052
 Vol.1-2022.10