


Working instruments

(for Percutaneous full-Endoscope)




画像はDown

商品名：YL鉗子	Type	Jaw Length	OD	Working Length
	Up	5mm	3.0mm	360mm
	Down			

※全長にわたり横長の鋸歯があり，歯の先端同士が合わさることで安全性と把持力の強化を両立させております．顎部は薄く，狭いところにも入れることができます．



画像はUp

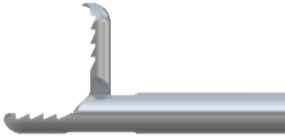商品名：eaglebeak forceps®	Type	Jaw Length	OD	Working Length
※イーグルビーク フォーセプス 	Up	5mm	3.0mm	350mm
	Down			
	Up	7mm		310mm
	Down			
	Up	5mm	3.5mm	350mm
	Down			


※先端部が鷹の嘴のように鉤型に曲がっており，先端の把持力が強化されております．その先端は鋭利ではなく，硬膜や神経への安全性にも配慮しております．

※写真は実物大ではありません．予告無く変更する場合がございます．
各種特注サイズ承ります．


販売名：フェジ鉗子
 一般的名称：再利用可能な内視鏡用非能動処置具
 製造販売届出番号：21B2X1001100001
 クラス分類：一般医療機器
 製造販売業者：足立工業株式会社
 TEL：0575-22-0052
 Vol.4-2023.6 (1/3)

Working instruments

(for Percutaneous full-Endoscope)

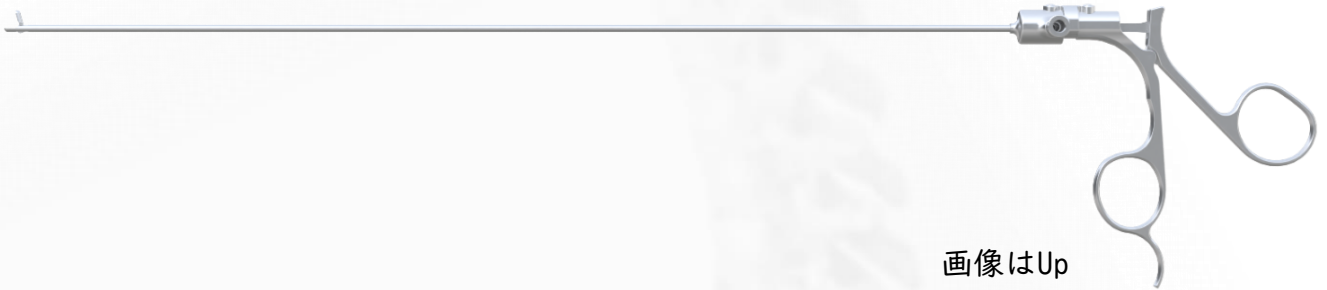


画像はUp

商品名：鋭匙鉗子(OD2.5mm)	Type	Jaw Length	OD	Working Length
	Up	3mm	2.5mm	350mm
	Down			

※一般的な形状の汎用鋭匙鉗子です。可動顎の開き角度は70~80°です。



画像はUp

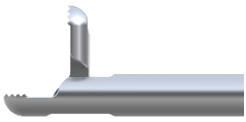商品名：鋭匙鉗子(OD3.5mm)	Type	Jaw Length	OD	Working Length
	Up	3mm	3.5mm	360mm
	Down			
	Up	5mm		
	Down			

※一般的な形状の汎用鋭匙鉗子です。可動顎を90°開けることができます。

※写真は実物大ではありません。予告無く変更する場合がございます。
各種特注サイズ承ります。


販売名：フェジ鉗子
一般的名称：再利用可能な内視鏡用非能動処置具
製造販売届出番号：21B2X1001100001
クラス分類：一般医療機器
製造販売業者：足立工業株式会社
TEL：0575-22-0052
Vol.4-2023.6 (2/3)

Working instruments


(for Percutaneous full-Endoscope)




画像はUp

商品名：KMパンチ	Type	Jaw Length	OD	Working Length
	Up	4mm	3.0mm	350mm
	Down			

※黄色靱帯の切除に用います。ケリソンのように対象の裏側に下顎を当てがい、刃先で靱帯に切れ目を入れて、二つの角で把持し引き出して摘出します。

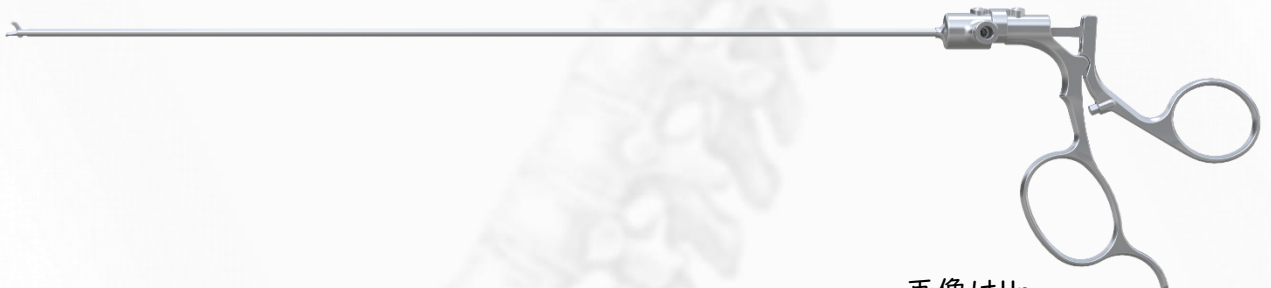

画像はUp

商品名：バスケットパンチ	Type	Jaw Length	OD	Working Length
	Up	3mm	2.5mm	310mm
	Down			

※黄色靱帯の切除に用います。刃物製造技術を生かして刃先のキレを高めています。

※写真は実物大ではありません。予告無く変更する場合がございます。
各種特注サイズ承ります。

販売名：フェジ鉗子
一般的名称：再利用可能な内視鏡用非能動処置具
製造販売届出番号：21B2X1001100001
クラス分類：一般医療機器
製造販売業者：足立工業株式会社
TEL：0575-22-0052
Vol.4-2023.6 (3/3)