






脊椎全内視鏡用外筒

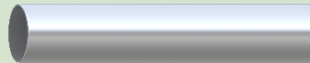

ワイドピッチのクリアランス調整ネジにて、内視鏡先からの外筒の出具合を素早くかつ無段階に調節することができます。

クリアランス調整ネジ
(取外し可能です。)

	straight
	75° oblique
	35° ~45° oblique
	duckbill
	stepped

OD	ID	length
9.5mm	8.6mm	112mm
8.0mm	7.1mm	170mm
7.5mm	6.5mm	170mm

※各種メーカーの脊椎全内視鏡に対応したサイズで作製できます。
詳しくはお問い合わせください。

※写真は実物大ではありません。予告無く変更する場合がございます。
各種特注サイズ承ります。

販売名：脊椎全内視鏡用外筒
一般的名称：トロカールスリーブ
製造販売届出番号：21B2X10011000010
クラス分類：一般医療機器
製造販売業者：足立工業株式会社
TEL：0575-22-0052
Vol.1-2024.2(P 1 / 1)