

Working instruments

(for Percutaneous full-Endoscope)


※全長にわたり横長の鋸歯があり、歯の先端同士が合わさることで
安全性と把持力の強化を両立させております。
顎部は薄く、狭いところにも入れることができます。



画像はDown

商品名： YL鉗子	Type	Jaw Length	OD	Working Length	製品番号	JANコード
	Up	5mm	3.0mm	360mm	F1-G5-UAL506-G536005	4582474286310
	Down				F1-G5-AL506-G536005	4582474299112
	Up			310mm	F1-G5-YLUJL5OD3-G416310	4582474289120
	Down				F1-G5-YLDJL5OD3-G416310	4582474289137

※先端部が鷹の嘴のように鉤型に曲がっており、先端の把持力が強化
されております。
その先端は鋭利ではなく、硬膜や神経への安全性にも配慮しており
ます。

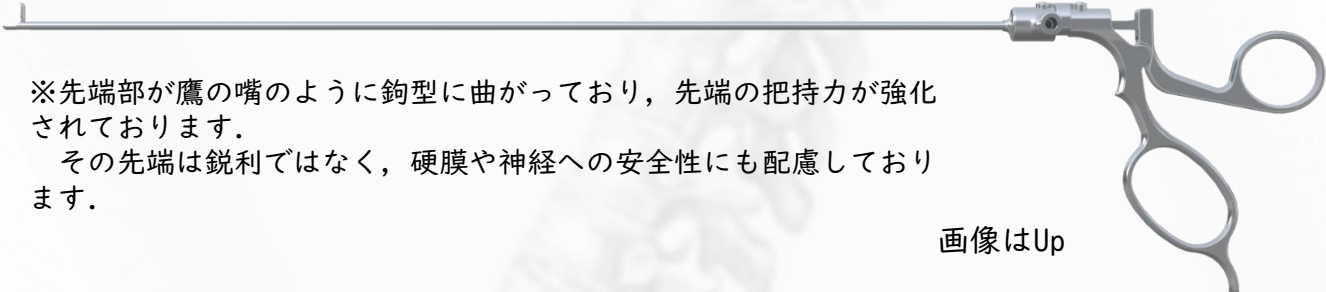

画像はUp

商品名： eaglebeak forceps®	Type	Jaw Length	OD	Working Length	製品番号	JANコード
※イーグルビーク フォーセプス 	Up	5mm	3.0mm	350mm	F1-G5-U5D3EG-3458351	4582474289458
	Down				F1-G5-D5D3EG-3458351	4582474289465
	Up	7mm		310mm	F1-G5-U7D3EG310-3108351	4582474289403
	Down				F1-G5-D7D3EG310-3108351	4582474286518
	Up	5mm	3.5mm	350mm	F1-G5-U5D35EG-3458351	4582474289472
	Down				F1-G5-D5D35EG-3458351	4582474289489

※写真は実物大ではありません。予告無く変更する場合がございます。
各種特注サイズ承ります。
販売名：フェジ鉗子
一般的名称：再利用可能な内視鏡用非能動処置具
製造販売届出番号：21B2X10011000001
クラス分類：一般医療機器
製造販売業者：足立工業株式会社
TEL：0575-22-0052
Vol.5-2025.8 (1/4)

Working instruments

(for Percutaneous full-Endoscope)

※一般的な形状の汎用鋭匙鉗子です。可動顎の開き角度は70～80°です。



画像はUp

商品名： 鋭匙鉗子	Type	Jaw Length	OD	Working Length	製品番号	JANコード
	Up	3mm	2.5mm	350mm	F1-G5-U3D25CF350-3458351	4582474289847
	Down				F1-G5-D3D25CF350-3458351	4582474289854
	Up			310mm	F1-G5-U3D25CF-3458351	4582474289434
	Down				F1-G5-D3D25CF-3458351	4582474289441
	Up			290mm	F1-G5-U3D25CF290-3458351	4582474286211
	Down				F1-G5-D3D25CF290-3458351	4582474286228

※一般的な形状の汎用鋭匙鉗子です。可動顎を90°開けることができます。




画像はUp

商品名： 鋭匙鉗子	Type	Jaw Length	OD	Working Length	製品番号	JANコード
	Up	3mm	3.5mm	360mm	F1-G5-U3ARTH-G3536504	4582474289328
	Down				F1-G5-D3ARTH-G3536504	4582474289311
	Up	5mm			F1-G5-U5ARTH-G3536504	4582474289274
	Down				F1-G5-D5ARTH-G3536504	4582474289267

※写真は実物大ではありません。予告無く変更する場合がございます。
各種特注サイズ承ります。
販売名：フェジ鉗子
一般的名称：再利用可能な内視鏡用非能動処置具
製造販売届出番号：21B2X10011000001
クラス分類：一般医療機器
製造販売業者：足立工業株式会社
TEL：0575-22-0052
Vol.5-2025.8 (2/4)

Working instruments


(for Percutaneous full-Endoscope)

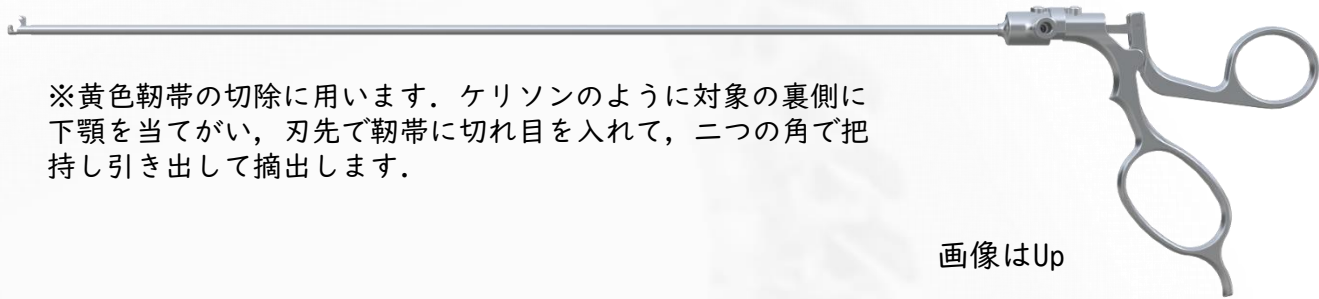

※黄色靱帯の切除に用います。ケリソンのように対象の裏側に下顎を当てがい、刃先で靱帯に切れ目を入れて、二つの角で把持し引き出して摘出します。

画像はUp

商品名： KMパンチ	Type	Jaw Length	OD	Working Length	製品番号	JANコード
	Up	4mm	3.0mm	350mm	F1-G5-U4D3NK-G350422	4582474285511
	Down				F1-G5-D4D3NK-G350422	4582474285528
	Up			310mm	F1-G5-U4D3NK-G310422	4582474289502
	Down				F1-G5-D4D3NK-G310422	4582474289519

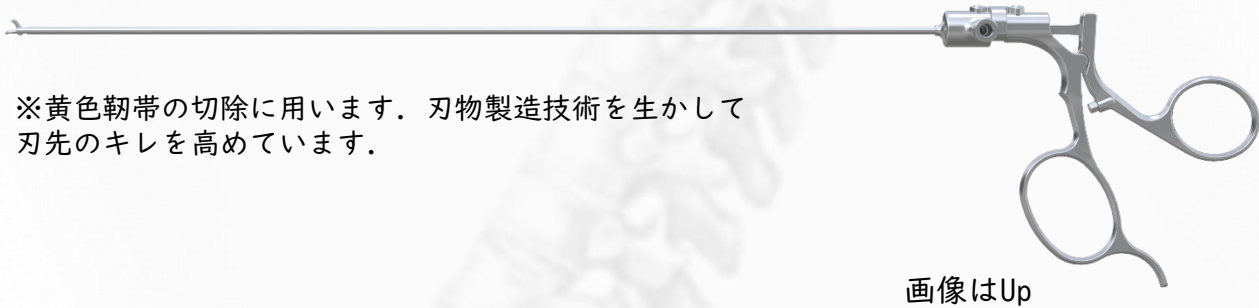

※黄色靱帯の切除に用います。刃物製造技術を生かして刃先のキレを高めています。


画像はUp

商品名： バスケットパンチ	Type	Jaw Length	OD	Working Length	製品番号	JANコード
	Up	3mm	2.5mm	310mm	F1-G5-U3D25PUN-3108351	4582474289625
	Down				F1-G5-D3D25PUN-3108351	4582474289915

※写真は実物大ではありません。予告無く変更する場合がございます。
各種特注サイズ承ります。
販売名：フェジ鉗子
一般的名称：再利用可能な内視鏡用非能動処置具
製造販売届出番号：21B2X10011000001
クラス分類：一般医療機器
製造販売業者：足立工業株式会社
TEL：0575-22-0052
Vol.5-2025.8 (3/4)

Working instruments

(for Percutaneous full-Endoscope)

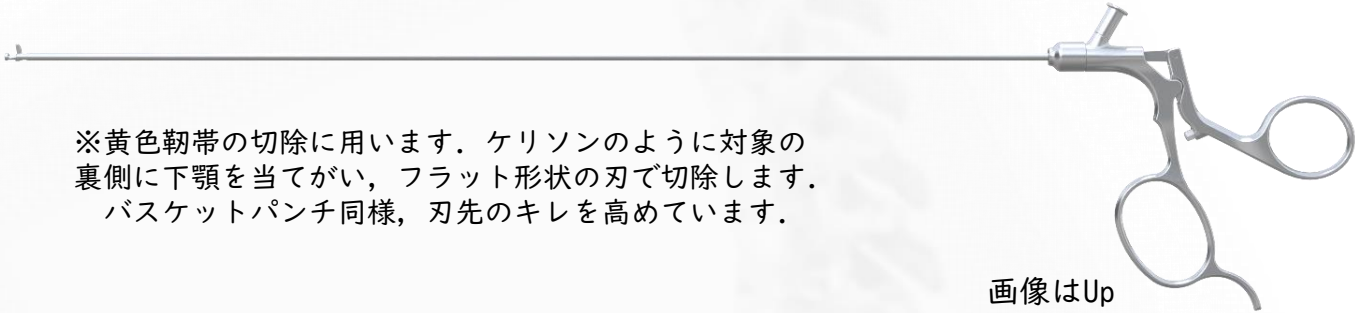

※黄色靱帯の切除に用います。ケリソンのように対象の裏側に下顎を当てがい、フラット形状の刃で切除します。バスケットパンチ同様、刃先のキレを高めています。

商品名： KMパンチ3 フラット刃	Type	Jaw Length	OD	Working Length	製品番号	JANコード
	Up	3.0mm	2.5mm	350mm	F1-G5-U3D25NKFL-G350463	4582474285818
	Down				F1-G5-D3D25NKFL-G350463	4582474285825

※写真は実物大ではありません。予告無く変更する場合がございます。
各種特注サイズ承ります。
販売名：フェジ鉗子
一般的名称：再利用可能な内視鏡用非能動処置具
製造販売届出番号：21B2X10011000001
クラス分類：一般医療機器
製造販売業者：足立工業株式会社
TEL：0575-22-0052
Vol.5-2025.8 (4/4)